

ENTSPANNT DURCH DEN WURZELKANAL. CHALLENGE ACCEPTED.



Shaping • Cleaning • Obturation

WaveOne® Gold

 Dentsply
Sirona

ERLEBEN SIE DIE BERUHIGENDE SICHERHEIT MIT WAVEONE® GOLD

Wurzelkanäle können eine Herausforderung sein. Die WaveOne® Gold Behandlungslösung bietet alles, was Sie brauchen, um Ihre nächste Endo-Behandlung mit Ruhe und Gelassenheit durchzuführen. Das Ergebnis? Eine endodontische Behandlung, die ein einfacher Teil Ihres Praxisalltags wird. Gehen Sie also selbstbewusst an die nächste Wurzelkanalbehandlung heran.

Eine umfassende Behandlungslösung in 3 einfachen Schritten.



SHAPING

Sichere Aufbereitung in der Hälfte der Zeit.¹ Eine kurze Sequenz für die meisten Fälle mit einer Gleitpfad- und einer Shaping-Feile durch die reziproke Bewegung und die Goldwärmebehandlung.²



SPÜLUNG

Effiziente Reinigung. Dafür sind die Spülkanüle wie auch der EndoActivator® konzipiert.




OBTURATION

Biokompatibler Sealer und eine exzellente Passform. Ganz gleich, ob Sie eine warme oder kalte Obturationstechnik bevorzugen, unser Biokeramischer Sealer unterstützt beides. Genießen Sie die Leichtigkeit mit Conform Fit® Guttapercha (kalt) oder GuttaCore® (warm).



DENTSPLY SIRONA MOTOREN

Jeder Winkel, jede Beschleunigung und jede Geschwindigkeit zählt, für beste Ergebnisse. Unsere Motoren sorgen für die richtige reziproke Bewegung für die echte reziproke Bewegung für WaveOne® Gold.

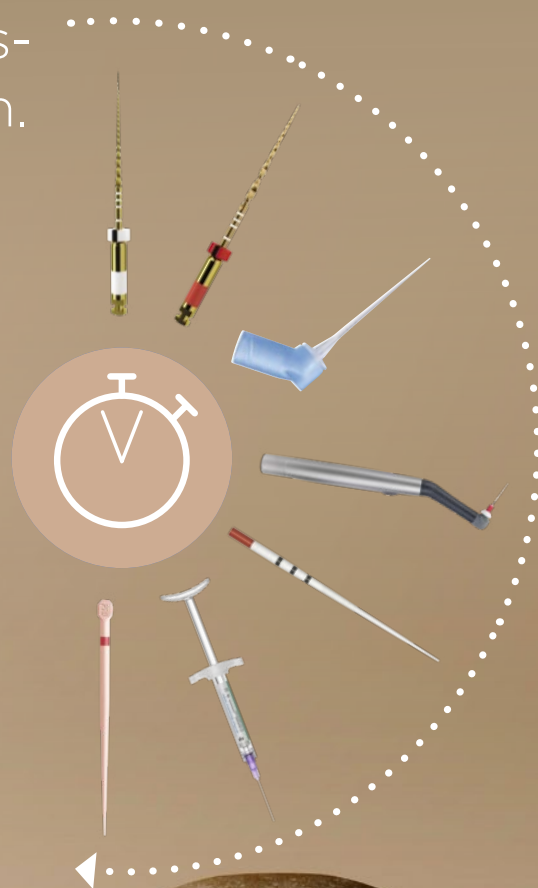

BUILDING ON
MAILLEFER
HERITAGE

1. Im Vergleich zu ProTaper® Universal

2. Im Vergleich zu nicht reziproken und wärmebehandelten Systemen

AUFBEREITUNG

CHALLENGE:

SICHERE AUFBEREITUNG IN DER HÄLFTE DER ZEIT¹

1

Eine kurze Sequenz für die meisten Fälle²

Scouting

ReadySteel®



010 02 - 25 mm

Gleitfad

WaveOne® Gold Glider



015 02 - 25 mm
Variabler Taper **2%**

Aufbereitung

WaveOne® Gold




Size Primary,
025 07 - 25 mm
Variabler Taper




Sicherheit - Eine Priorität

- Flexibel aufgrund der reziproken Bewegung und der Gold-Wärmebehandlung
- Belegt durch 200 wissenschaftliche Studien
- Mehr als 30 Millionen erfolgreich behandelte Zähne

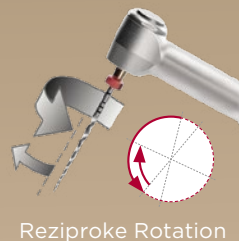

Reziproke Rotation

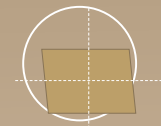

Weiterentwickelter Querschnitt



Zeitersparnis

- Ein-Feilen-Technik halbiert die Aufbereitungszeit!¹
- Aufarbeitung und Dokumentation entfallen
- Hohe Schneidleistung⁵



Einfach im Handling

- Steile Lernkurve³
- Gute Kontrolle des Instrumentenverlaufs⁴

Small		020	7%
Primary		025	7%
Medium		035	6%
Large		045	5%

1. Verglichen mit ProTaper Universal

2. Eine Gleitfad-Feile und eine Aufbereitungs-Feile in den meisten Fällen.

3. Interner Anwendertest. Daten auf Anfrage erhältlich, siehe Kontaktdaten.

4. Verglichen mit WaveOne

5. Höhere Schneidleistung als WaveOne und gleichbleibende Schneidleistung dank Einmalgebrauch

SPÜLUNG

CHALLENGE: EFFIZIENTE REINIGUNG

SPÜLKANÜLE



Effizient

- Fortschrittliche Technologie mit zwei seitlichen Austrittsöffnungen, die eine ausgewogene Verteilung der Spülflüssigkeit gewährleisten
- Hochflexibles Polypropylen zur Spülung bei stark gekrümmten Kanälen



Sicher


- Die seitlichen Austrittsöffnungen reduzieren das Risiko der Extrusion am Apex.
- Hochflexibles Polypropylen zur Spülung bei stark gekrümmten Kanälen




ENDOACTIVATOR®

Mehr geöffnete Dentintubuli

Eine passive Spülung ist nicht genug. Die Aktivierung von Spülflüssigkeit erzeugt eine Oberfläche mit mehr geöffneten Dentinkanälchen, die eine bessere Obturation der lateralen und akzessorischen Kanälen gewährleistet.⁶

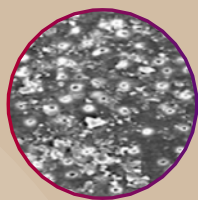

Nicht aktiviertes
Dentin

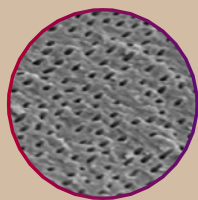

Nach der
Aktivierung

SmartLite Pro EndoActivator™

COMING
SOON



6. Kanter V, Weldon E, Nair U, et al. Eine quantitative und qualitative Analyse von Ultraschall- und Schall Aktivierungssystemen im Hinblick auf die Sauberkeit des Kanals und der Obturation. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 2011;112(6):809-813. doi:10.1016/j.tripleo. 2011.06.002

OBTURATION

CHALLENGE:

BIOKOMPATIBLER SEALER UND OPTIMALE PASSUNG

AH PLUS® BIOKERAMISCHER SEALER



Biokompatibel

Der bioaktive Sealer schafft eine ideale Umgebung für die Produktion von Hydroxylapatit und fördert die Heilung.³



Passend für Ihre Vorlieben

Kompatibel mit kalten und warmen Obturationstechniken



Kalte Obturation

CONFORM FIT® GUTTAPERCHA



- Profitieren Sie von der hervorragenden Passform der im Spritzgussverfahren hergestellten Conform Fit® Guttapercha Spitzen, die auf unsere WaveOne® Gold Feilen abgestimmt ist.⁷
- Praktischer Griff und Farbmarkierungen zur einfachen Identifizierung der richtigen ISO Größe

Warme Obturation

GUTTACORE®

- Sicherheit einer warmen 3D-Füllung und in der Anwendung einfach wie ein kalter Guttapercha-Stift
- Obturatoren mit vernetztem Guttapercha-Kern und ummantelt mit fließfähiger Guttapercha, die die den natürlichen Kanal dreidimensional ausfüllt

Höheres apikales Füllvolumen der Guttapercha-Spitzen⁷

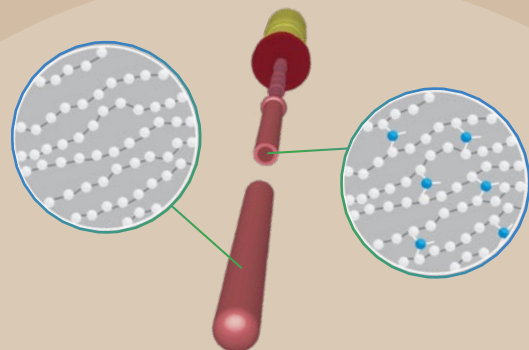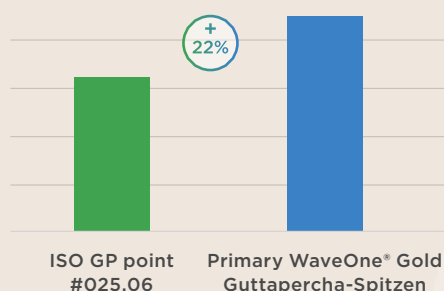







⁷ Interne Daten. Auf Anfrage erhältlich, siehe Kontaktdaten.

WaveOne® Gold

Produkt-Referenzen







WaveOne® Gold Reziproke Gleitpfadfeile

Glider - 015, 02 variabler Taper

	3 x 21 mm	B ST WIGG 321 015
	3 x 25 mm	B ST WIGG 325 015
	3 x 31 mm	B ST WIGG 331 015
	6 x 21 mm	B ST WIGG 621 015
	6 x 25 mm	B ST WIGG 625 015
	6 x 31 mm	B ST WIGG 631 015

WaveOne® Gold Reziproke Aufbereitungsfeilen

Small - 020, 07 variabler Taper

	3 x 21 mm	A 0753 221 G0S 03
	3 x 25 mm	A 0753 225 G0S 03
	3 x 31 mm	A 0753 231 G0S 03
	6 x 21 mm	A 0756 221 G0S 03
	6 x 25 mm	A 0756 225 G0S 03
	6 x 31 mm	A 0756 231 G0S 03







Primary - 025, 07 variabler Taper

	3 x 21 mm	A 0753 221 GOP 03
	3 x 25 mm	A 0753 225 GOP 03
	3 x 31 mm	A 0753 231 GOP 03
	6 x 21 mm	A 0756 221 GOP 03
	6 x 25 mm	A 0756 225 GOP 03
	6 x 31 mm	A 0756 231 GOP 03

Medium - 035, 06 variabler Taper

	3 x 21 mm	A 0753 221 G0M 03
	3 x 25 mm	A 0753 225 G0M 03
	3 x 31 mm	A 0753 231 G0M 03
	6 x 21 mm	A 0756 221 G0M 03
	6 x 25 mm	A 0756 225 G0M 03
	6 x 31 mm	A 0756 231 G0M 03




Large - 045, 05 variabler Taper

	3 x 21 mm	A 0753 221 GOL 03
	3 x 25 mm	A 0753 225 GOL 03
	3 x 31 mm	A 0753 231 GOL 03
	6 x 21 mm	A 0756 221 GOL 03
	6 x 25 mm	A 0756 225 GOL 03
	6 x 31 mm	A 0756 231 GOL 03

WaveOne® Gold Reziproke Aufbereitungsfeile




Sortiment

Small/Primary/Medium/Large

	4 x 21 mm	A 0754 221 G9A 03
	4 x 25 mm	A 0754 225 G9A 03
	4 x 31 mm	A 0754 231 G9A 03

WaveOne® Gold Sequenzblister:

K-file 10, WaveOne Gold Glider, WaveOne Gold Primary

	3 x 25 mm	B ST W1GS 325 AST
		
		

Spülkanüle

	x5	B NS DSIN 522 30G
	x40	B NS DSIN D22 30G

WaveOne Papierspitzen

180 x Sterile Papierspitzen

	A 175W 000 00S 03 Small
	A 175W 000 00P 03 Primary
	A 175W 000 00M 03 Medium
	A 175W 000 00L 03 Large
	A 175W 000 AST 03 Sortiment

Conform Fit® Guttapercha für WaveOne® Gold

60 x Conform Fit Guttapercha Spitzen

	B 00 WGPP F00 SML Small
	B 00 WGPP F00 PRI Primary
	B 00 WGPP F00 MED Medium
	B 00 WGPP F00 LRG Large
	B 00 WGPP F00 AST Sortiment

GuttaCore® für WaveOne® Gold

Blister (5 Obturatoren + 1 size verifier)

	B NS GCWG 500 SML Small
	B NS GCWG 500 PRI Primary
	B NS GCWG 500 MED Medium
	B NS GCWG 500 LRG Large

Box mit 5 Blistern

B NS GCWG C00 SML Small
B NS GCWG C00 PRI Primary
B NS GCWG C00 MED Medium
B NS GCWG C00 LRG Large

SmartLite Pro EndoActivator™



COMING
SOON

Thermaprep Ofen



230V EU **B 00TH PR230V EU**

WaveOne® Gold Treatment Solution Kit



B 00 W1GO TSO KIT

- 4 WaveOne® Gold Sequence Blister
- 2 WaveOne® Gold Glider 3 Feilen Sterile 25 mm
- 2 WaveOne® Gold Small 3 Feilen Sterile 25 mm
- 2 WaveOne® Gold Primary 3 Feilen Sterile 25 mm
- 2 WaveOne® Gold Medium 3 Feilen Sterile 25 mm
- 1 WaveOne® Gold Large 3 Feilen Sterile 25 mm
- 1 WaveOne® Gold Conform-Fit™ Guttapercha Assortment
- 1 WaveOne® Gold Papierspitzen Sterile - Primary
- 2 Irrigation Needle (5 x)
- 1 WaveOne® Gold Tip Card

Dentsply Sirona

Deutschland / Österreich
Dentsply Sirona Europe GmbH
Sirona Straße 1, 5071 Wals bei Salzburg, Österreich
pre@dentsplysirona.com

Schweiz
Dentsply Sirona Schweiz AG
Täferweg 1, 5405 Baden-Dättwil, Schweiz
info.ch@dentsplysirona.com

Besuchen Sie uns auf:  [dentsplysirona.com](https://www.dentsplysirona.com)  facebook.com/dentsplysirona  [dentsplysirona.de](https://www.instagram.com/dentsplysirona)

© Dentsply Sirona Inc 2023, Alle Rechte vorbehalten.

